

# Jabbla nodigt uit

Mind Express voor talige uitdagingen

# Vandaag

- Papier → Digitaal
- Visualisatie → Communicatie

Ondersteuning taalvorm, -inhoud en -gebruik  
(bv. T2, STOS/OD, Gestalt taalverwerving ...)

- Communicatie → tijd

# Start



## Starten met Mind Express en/of je spraakcomputer

Bewerken

Mind Express 5

Via onze website kan je **contact leggen met een adviseur of verdeler in jouw land**, die je op weg kan helpen met Mind Express en/of een spraakcomputer.

Doorheen je traject kunnen er wat vragen rijzen.

- Hoe log ik in, in Mind Express 5?
- Hoe voeg ik foto's of eigen figuren toe aan een communicatiebestand?
- Hoe bewerk ik het communicatiebestand van de O.C.-gebruiker op mijn eigen computer?
- Kan ik ervoor zorgen dat de stem en uitspraak aangepast is?
- Kan ik vermijden dat de O.C.-gebruiker verdwaalt in andere programma's op de computer?
- Is een back-up mogelijk?
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat collega's m'n profielen kunnen zien en gebruiken?
- Waar kan ik terecht bij vervolgvragen?
- ...

<https://www.jabbla.com/faq/starten-met-mind-express-en-of-je-spraakcomputer/>



# Start



Ga op zoek in onze vele Mind Express documenten. Selecteer ze en importeer.

print

- Symbolcommunicatie
- Tekstcommunicatie
- Spelletjes
- Educatief
- Apps

Vaak gebruikt

Meer zoekopties ▾

SCORE v2 print (up-to-date)

Door Jabbla  
11-04-2024, 933 downloads  
Nederlands

Materiaal voor SCORE versie 2: Naast een digitale versie, heeft SCORE v2 ook papieren communicatiekaarten. Volgende kaarten kan je hier alvast downloaden:

- A4 communicatiekaart (SCORE v2) (Nederlands)

[Lees meer](#)

Printen met Mind Express

Door Jabbla  
10-04-2024, 29 downloads  
Nederlands

Gebruik jij Mind Express voor printmateriaal? Dan vind je [deze info in de handleiding](#) misschien behulpzaam? In dit document vind je alvast:

- wat info je nodig hebt om Mind Express te gebruiken (Nederlands)

[Lees meer](#)

SCORE v2 (print) knipvel A3-kaart randwoordenschat

Door Christine / Jabbla  
08-04-2024, 329 downloads  
Nederlands

Deze pagina is een sjabloon om eenvoudig knipvellen te maken voor het middenvak van je A3-communicatiekaart (SCORE v2). Zo kan je binnen Mind Express de gewenste woordenschat toevoegen, aanpassen en printen. Het kan een mooi startpunt bieden, om met SCORE v2 aan de slag te gaan. Je kan het ook als aanvulling bij de digitale versie van SCORE v2 inzetten. De afdrukafmeting:

[Lees meer](#)

Door Jabbla  
05-03-2024, 9 downloads  
Nederlands

In ME5 > in een profiel naar keuze > Menu > Importeren > Online documenten > zoekbalk of filters

# Start



Ga op zoek in onze vele Mind Express documenten. Selecteer ze en importeer.


- Symboolcommunicatie
- Tekstcommunicatie
- Spelletjes
- Educatief
- Apps

Vaak gebruikt

Minder zoekopties

**Talen**

- Nederlands
- Dansk
- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Norsk

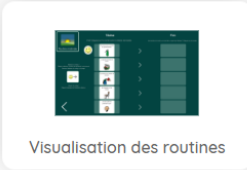

Visualisation des routines

Door Ineke  
11-04-2024, 1 downloads  
Français

Utilisez ce document pour visualiser et suivre pas à pas certaines routines dans votre classe ou votre groupe. Ce document pourrait encourager les élèves à être autonomes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la personnalisation et/ou si vous avez des commentaires pour le développement de ce document. Ce document a été développé par la thérapeute.

[Lees meer](#)



Emotions et sentiments (avec compteur de sentiments)

Door Ineke  
08-03-2024, 32 downloads  
Français

Lorsque vous êtes heureux et joyeux, vous partagez facilement vos sourires. Mais que se passe-t-il si les choses ne vont pas si bien ? Vous vous disputez, vous êtes en colère, une frustration se fait jour... Comment gérer cela ? Comment commencer à en parler ? Outre la communication non verbale, nous croyons au pouvoir des mots pour exprimer clairement les sentiments et les besoins. Qui sait.

[Lees meer](#)



Association mot - image

Door Ineke  
08-03-2024, 27 downloads  
Français

Lisez le mot au centre de la page. Associez ce mot à l'une des images. Personnaliser : personnaliser le contenu de chaque page dans le mode d'édition (Menu > Edition > Panneau d'édition de droite : figure et/ou étiquette et/ou actions).

[Lees meer](#)



Door Jabbla  
16-11-2023, 1721 downloads  
Français

In ME5 > in een profiel naar keuze > Menu > Importeren > Online documenten > Meer zoekopties





# Educatief: 'Printen met Mind Express'



Daglijn  
(verticaal)



Daglijn  
(horizontaal)



Wandplaten  
(A4 - liggend)



stappen Meichenbaum  
(A4 - liggend)

GoTalk



# Educatief: 'GoTalk, Quicktalker, Supertalker'



Ga op zoek in onze vele Mind Express documenten. Selecteer ze en importeer.

- Symboolcommunicatie
- Tekstcommunicatie
- Spelletjes
- Educatief
- Apps

Vaak gebruikt

Minder zoekopties ▲

Talen

- Nederlands
- Dansk
- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Norsk

Door Jabbla  
27-09-2021, 100 downloads  
Nederlands

Gebruik het sjabloon GoTalk20+.

Door Jabbla  
27-09-2021, 102 downloads  
Nederlands

Gebruik het sjabloon GoTalk4+.

Door Jabbla  
27-09-2021, 144 downloads  
Nederlands

Gebruik het sjabloon GoTalk9+.

Door Jabbla  
27-09-2021, 63 downloads  
Nederlands

Gebruik het sjabloon GoTalkExpress32.



# Taal: SCORE



Info over bewerken, opslaan en printen 

Kies hieronder een kaart

A4-formaat, 40 kernwoorden 

A3-formaat, 40 kernwoorden 

sjabloon randwoordenschat (A3-kaart) 

A3-formaat (thuisversie) 

A3-formaat (schoolversie) 

A3-formaat (speelplaatsversie) 

Kleefstroken voor extra kernwoordenschat (bij de A3-kaart) 

Klik hier voor meer info over onze muurkaarten ('Papieren versie SCORE' op de gelinkte webpagina). 

Sjabloon eigen picto's A3-kaart (formaat A0-muurkaart) 



# Educatief: 'Stappenplannen'

## Taakje:

Klaar? Klik op het kaartje met de afgeronde taak.



## Klaar:

Kaartje 'terughangen' bij de taakjes? Klik op het kaartje.

Ik hang mijn jas aan de kapstok.



Ik doe mijn brooddoos in de bak.



U kan je de  
na.

als op het

# Nieuwe documenten

## Apps: 'Camera: foto's (met tekstboodschap) en fotoalbums maken



1. De foto die je wil toevoegen aan je album:



2. Wil je een boodschap maken bij deze foto?



Toevoegen aan album (zonder boodschap)



Toevoegen aan album (met een eigen boodschap)



# Multimodale documenten



Camera foto's (met tekstboodschap) en fotoalbums maken




Hé daar komt de taxi! (liedje over taxi vervoer school)



Het Sprekend Boek



Visual Scene Display (voorbeeld in de klas)

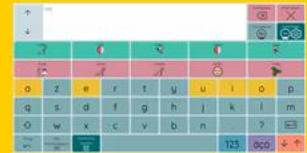

AZERTY Letterkaart met symboolvoorspelling en zinsvoorspelling



ALOHA2.3 Vlaams ME5



# Educatief: 'Visual Scene Display (voorbeeld: in de klas)'



voeg cel toe



maak foto



verwijder foto



filmpjes



gebaren



juf



vertellen



kring



beurt



voeg cel toe



maak foto



verwijder foto



Info



Instellingen



filmpjes




gebaren




poppenhoek



samen

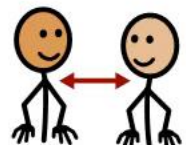


om de beurt

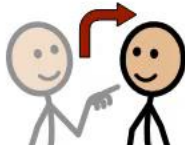

leuk



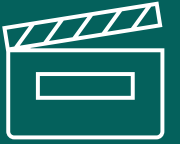

# Document 'Hé daar komt de taxi!'

Document interface for the video 'Hé, daar komt de taxi! Juf Jolijn'.

**Left sidebar (Action verbs):**

- wij (we)
- gaan (go)
- kijken (look)
- komen (come)
- rijden (drive)

**Right sidebar (Control and Adjectives):**

- Start het filmpje
- pauze/start
- in
- uit
- niet (not)
- moe (tired)
- leuk (fun)

**Bottom row (Nouns):**

- wachten (wait)
- school
- huis (house)
- logeren (stay)
- tas (bag)
- taxi
- mama (mom)
- Papa (dad)
- kus (kiss)
- stoplicht (traffic light)

**Video Player:** Hé, daar komt de taxi! Juf Jolijn. 0:51 / 2:08. YouTube.

# STOS/OD

- Auditieve verwerkingsproblemen,
- Zwak auditief kortetermijngeheugen,
- Zwak fonologisch en fonemisch bewustzijn,
- Taalbegripsproblemen,
- Fonologische problemen,
- Verbale ontwikkelingsdyspraxie,
- Woordvindingsproblemen en parafasieën,
- Dys- of agrammatisme,
- Communicatieve intentieproblemen,
- Problemen met narratieve vaardigheden/verhaalopbouw,
- Onvloeïend spreekgedrag
- Hypospontaneïteit



# STOS/OD en Mind Express

- Fonetische acties
- Notatiebalk
- Symboolvoorspelling
- Categorië
- Grammaticale acties
- Logische reeksen

# AZERTY letterkaart

toetsbord > azerty woordvoorspelling

The interface displays a keyboard layout with a prediction bar above it. The prediction bar shows several suggestions: 'Ik', 'Jij', 'Hij', 'Ze', and 'De', each with a small icon and the text 'woordvoorspelling'. Below the prediction bar is a standard AZERTY keyboard layout. The right-hand panel shows settings for the prediction feature, including options for 'Fonetisch' (Phonetic) and 'Actie toevoegen' (Add action). An orange box highlights the 'Fonetisch' option.

backspace    alles wissen

voorspel zin    instellingen

Ik    Jij    Hij    Ze    De

woordvoorspelling    woordvoorspelling    woordvoorspelling    woordvoorspelling    woordvoorspelling

a    z    e    r    t    y    u    i    o    p

q    s    d    f    g    h    j    k    l    m

↑    w    x    c    v    b    n    .    ?    ↩

Terug    mijn boodschappen    boodschap opslaan    123    äçó    ↓ ↑

Vakje    Pagina    Document

Figuur    Label    Aa    k    Stijl    Stijl 10

Acties

Fonetisch    k

Actie toevoegen

Eigenschappen

Zichtbaar    Selecteerbaar

Sleepbaar    Toevoegen aan notitie

ID

Knippen/Plakken

Meerdere vakjes

Scanning/Dwelling

# Grammatica (voor of na het selecteren van een woord)

Klik eerst op een grammaticaknop en daarna op een woord (= post-grammatica/functies nadien)



Klik eerst op een woord en daarna op een grammaticaknop (= post-grammatica/functies nadien)





# Educatief: 'Syntaxis – zinnen bouwen met 4 delen'

Four educational cards are arranged horizontally, each with a circular icon above it. The icons are: a left-pointing arrow, a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, and a right-pointing arrow.


- Card 1 (Yellow):** Text: "de leraar". Icon: A teacher pointing at a chalkboard.
- Card 2 (Green):** Text: "schrijven". Icon: A hand writing on a piece of paper with a pencil.
- Card 3 (Orange):** Text: "op het bord". Icon: A chalkboard with "ABC" written on it.
- Card 4 (Brown):** Text: "op school". Icon: A school building.

# Logische reeksen


Plaats de gebeurtenissen in de juiste volgorde.  
Controleer daarna je werk.




Ik was mijn handen.







Ik open de kraan.



Ik neem een pompje zeep.





# Document 'Het Sprekend Boek'

lenteboekjes

<b>SPRING</b>						
6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Thema's


Terug naar Aloha




stop praten




Hoe inloggen?



Olifantensoep



De paraplu



Een gat in mijn emmer



Ze lopen gewoon met me mee




De mooiste vis van de zee




Tien kikkers en een olifant




Schatje en scheetje




Er kan nog meer bij




De wiebelbilenboogie



Helemaal verkikkerd



Samen kunnen we alles



Raf




# Gestalt Language Processing

- Gestalt/script/taalbrok
- Uitgestelde echolalie

# Gestalt Language Processing en Mind Express

- Berichtenset:
  - Categorieën rond bepaalde thema's maken
  - Opnames maken
  
- Voice smileys



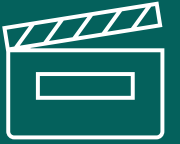

# Document 'Hé daar komt de taxi!'

Document 'Hé daar komt de taxi!' Juf Jolijn

Later bekij... Delen

Start het filmpje

in

gaan

uit

kijken

niet

komen

moe

rijden

leuk

wachten

school

huis

logeren

tas

taxi

mama

Papa

kus

stoplicht

MEER VIDEO'S


0:51 / 2:08

YouTube



# Berichtenset

## Eigen Berichtenset opbouwen

1 Maak categorieën om je boodschappen te organiseren.

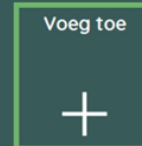


2 Stel je berichten op.

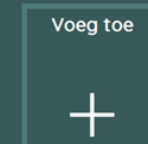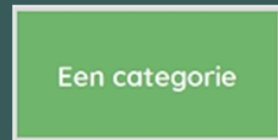

3 Bekijk en gebruik je berichtenset.



# Voice smileys

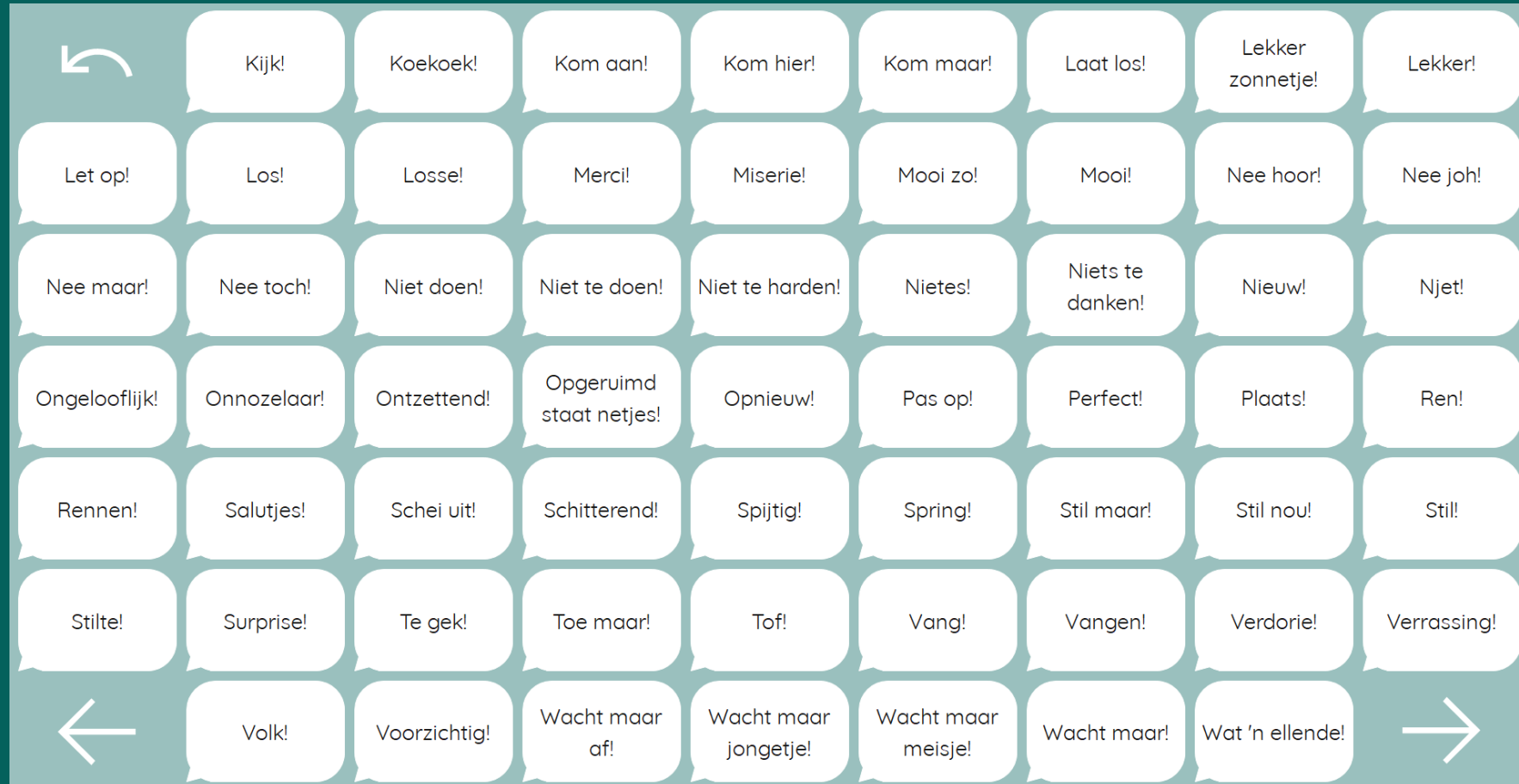

# Taal: ARA



terug 		nieuw 	op 	vragen 	stop 		
ik 	activiteit <b>A</b>	dieren/natuur 	eten & drinken 	feest 	hallo 	niet 	klaar 
jij 	gevoel 	het is 	huis 	letters en cijfers <b>A B</b> 1+1=2	dàg 	nog 	mag ik 
mensen 	lichaam 	over mij 	plaatsen 	praatjes 	alsjeblieft 	hebben 	zijn 
ja 	school 	spelen 	tijd 	voertuigen 	dank je wel 	acties 	nee 




# Taal: SCORE




instellingen 	wis alles 	goed 								openvouwen 	wis woord 	ongedaan 
klutsen 	mensen 	eten/drinken 	lichaam 	tijd 	school 	vrije tijd 	huis 	onderweg 	dieren/natuur 	media/extra's 	toetsenbord 	cijfers 123
basis 	+e + E	vergroterend 	overtreffend 		dat 	voor 	als 	kunnen =	van 	te 		woorden samenvoegen 
de 	een 	het 		als 	en +	maar 	of 		waar 	wat 	wie 	
mijn 	jouw 	onze 		in 	op 	van 	voor 		daar 	dan 	hier 	hallo 
ik 	mama 	zijn =	1e 	alsjeblieft 	doei 	goedemorgen 	grapje 	snel contact 	meer 	niet 	nog 	dank je wel 
jij 	papa 	hebben 	2e 	hoe gaat het? 	hoi 	iets leuks gedaan 	iets leuks doen 	ik wil je iets laten 	nu 	ook 	veel 	klaar 
hij 	zij 	doen 	3e 	mag ik meedoen? 	sorry 	tot morgen 	tot ziens 	wat gedaan gisteren? 	weg 	zo 		oh oh 
wij 	alle 	gaan 	mv 	wat heb jij daar? 	... wat vertellen 	wil jij meedoen? 			drinken 	eten 	geven 	OK 
jullie 	iets 	kunnen =	moeten 						komen 	kijken 	maken 	weet ik niet 
zij 	samen 	mogen 	willen 						opruimen 	pakken 	spelen 	dag 
JA		worden 	zullen 	goed 	groot 	lekker 	mooi 		weten 	zitten 		NEE

# Taal: 'ALOHA opstart' 'eten en spelen' 'zingen en spelen'



2 keuzes	4 keuzes	8 keuzes
 16 keuzes	 26 keuzes	 kijk op <a href="http://www.alohaoc.nl">www.alohaoc.nl</a> voor meer informatie

# Taal: 'ALOHA opstart' 'eten en spelen' 'zingen en spelen'

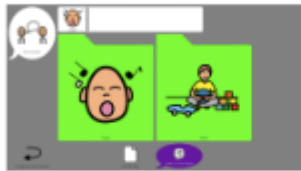

ALOHA opstart zingen en spelen

Selecteer

Door Jabbla  
22-03-2024, 64 downloads  
Nederlands

Is het communiceren met ALOHA iets voor jouw kind, maar is onduidelijk hoeveel pictogrammen op één blad kunnen staan? Wil je bekijken uit hoeveel pictogrammen jouw kind een selectie maakt/kan leren maken? Wil je het aantal pictogrammen in stapjes kunnen uitbreiden? Probeer dan geheel vrijblijvend ALOHA opstart uit. ALOHA opstart is een aangepaste versie van het kant-en-klaar symboolvocabulaire ALOHA. Hiermee kan je bekijken hoeveel pictogrammen het kind kan (leren) selecteren op een blad, onder andere via touch, scanning of logbesturing. Dit document is gratis uit te proberen in Mind Express. Meer informatie over hoe je aan de slag gaat met dit document vind je in [deze handleiding](#).

# Meertaligheid: FAQ

## Talen en stemmen in Mind Express 5

Mind Express 5 stemmen

Als je Mind Express 5 installeert, heb je meteen de stemmen en talige functionaliteiten (grammatica, woord- en zinsvoorspelling, symbolensets ...) voor de gekozen taal.

Mind Express biedt echter ondersteuning voor meerdere talen:

- Wil je de juiste **stem** (verklanking/uitspraak) voor een bepaalde taal?
  - In de "Instellingen" van je "Sprak", kan je nagaan of de stem (al) een optie is in Mind Express.
  - Zie je de gewenste stem niet staan? Dan kan je controleren of Mind Express momenteel één of meerdere stemmen beschikbaar heeft voor deze taal via "**Meer stemmen installeren?**".  
Geen stem beschikbaar voor een bepaalde taal of interesse om je eigen stem te banken? Informeer dan bij je verdeler of bij Jabbla zelf, wat mogelijk is in combinatie met Mind Express.
  - Als je de stem vindt, die je nodig hebt, lees dan de info op **deze bovenvermelde webpagina** om verder te gaan.
  - Verander je de stem naar een andere taal, dan wijzigen stemgerelateerde functionaliteiten automatisch mee:
    - uitspraakwoordenboek
    - woord- en zinsvoorspelling
    - berichtenset




# Document 'Vertalen'




- Van ... naar ... (2 richtingen)
- Azerty/Qwerty/ABC ...
- 'Onafhankelijk' document

# Document 'Vertaalapp'

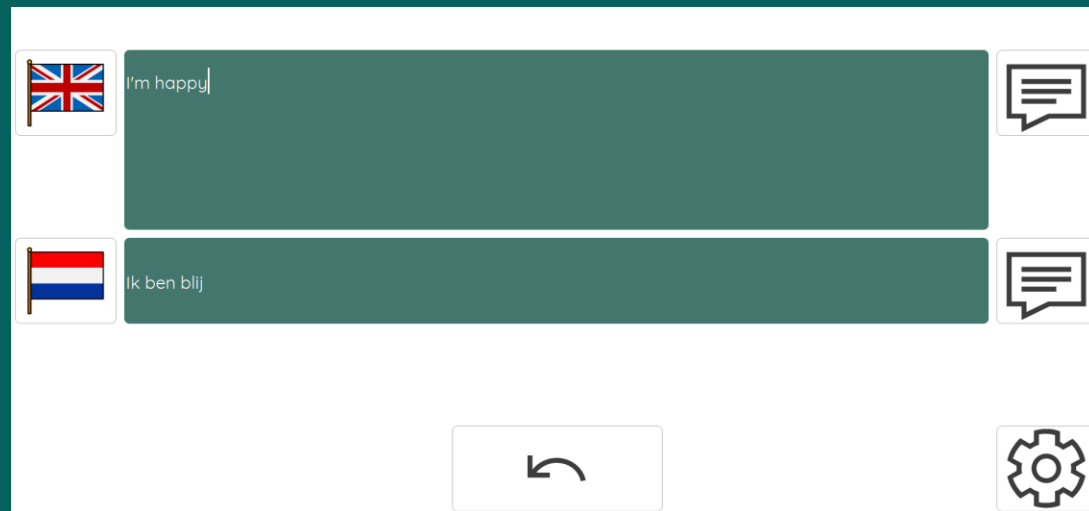

- Van ... naar ... (2 richtingen)
- Koppeling met eigen taalsysteem

# Document 'ALOHA 1.3 (NL en VL) - Vertaalapp' & 'ALOHA 2.3 (NL en VL) – Vertaalapp'

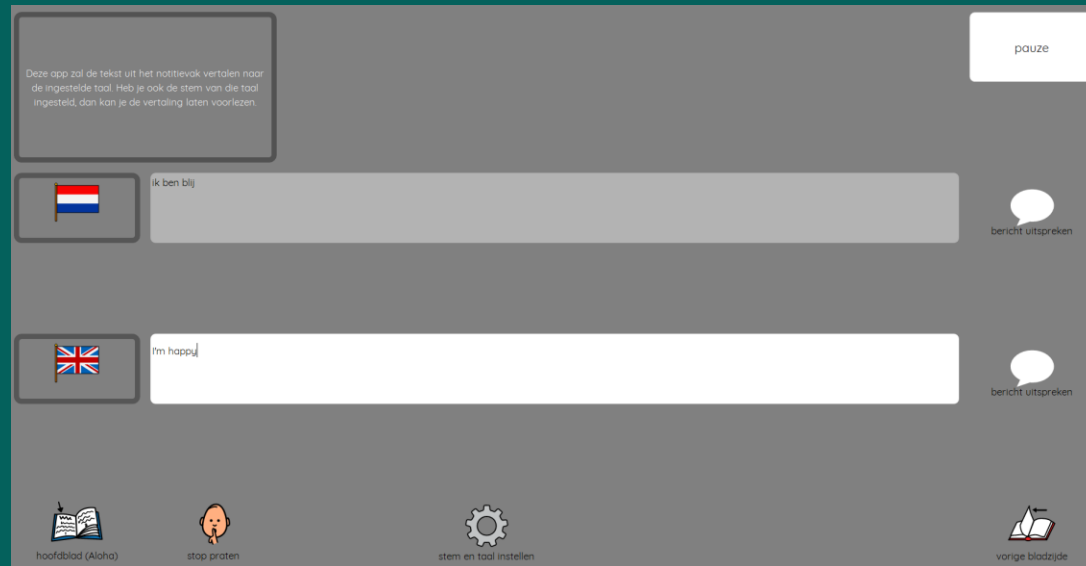


















- Van NL naar ... (1 richting)
- Koppeling met eigen taalsysteem

# Document 'Vertalen in de klas'

Ik hang mijn jas aan de kapstok.

backspace








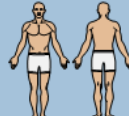







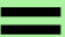













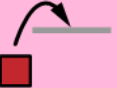


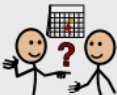































1. Kies een boodschap:

Bij STOP hou ik op. 	Ik gebruik geen gsm in de klas. 	Ik ben lief voor anderen. 	Ik ben stil wanneer iemand praat. 	Ik eet niet in de klas. 	Ik ruim op in de klas. 
Ik gooi mijn afval in de vuilbak. 	Ik hang mijn jas aan de kapstok. 	Ik help anderen. 	Ik kom op tijd naar school. 	Ik maak mijn huiswerk thuis. 	In de rij ben ik stil. 
Ik speel samen met anderen. 	Ik steek mijn vinger op. 	Ik vecht niet! 	Ik vraag hulp. 	Ik zit op mijn stoel. 	← Ga naar communicatiebestand


2. Klik op de vertaalknop hieronder, om de boodschap te vertalen naar de gewenste taal:

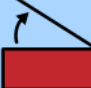Vertalen


- Van NL naar ... (1 richting)
- Koppeling met eigen taalsysteem

instellingen 	wis alles 							vertaling 	wis woord 
kletsen 	mensen 	eten/drinken 	lichaam 	tijd 	school 	vrije tijd 	huis 	onderweg 	
Vul je naam hier in. 	zijn 	en 		op 		waar 		niet 	dag 
ik 	hebben 	alsjeblieft 	ou 	ja, dat is goed 	dat mag niet 	kletsen 1 	drinken 	nog 	dank je wel 
jij 	doen 	doei 	... gisteren? 	grapje 	he 	hoe gaat het? 	eten 	nu 	klaar 
mama 	mogen 	hoi 	hou op 	iets anders 	ik ga iets leuks doen 	ik heb iets leuks gedaan 	kijken 	ook 	oh oh 
papa 	willen 	ik wil stoppen 	maakt mij niet uit 	mag ik meedoen? 	stoppen 		spelen 	weg 	OK 
		blij 	goed 	lekker 	open 				weet ik niet 

vertaling



wis woord



niet



dag




nog




dank je wel




nu





klaar





Vakje Pagina Document




Figuur

 vertaling 



Label



 vertaling 

Stijl


 Functie


Acties


 Ga naar... 


 Vertalen in de klas 

Actie toevoegen

Eigenschappen 

Knippen/Plakken 

Meerdere vakjes 

Scanning/Dwelling 

Document

Ga naar pagina




Vertalen in de klas



2


# Acties rond vertalen

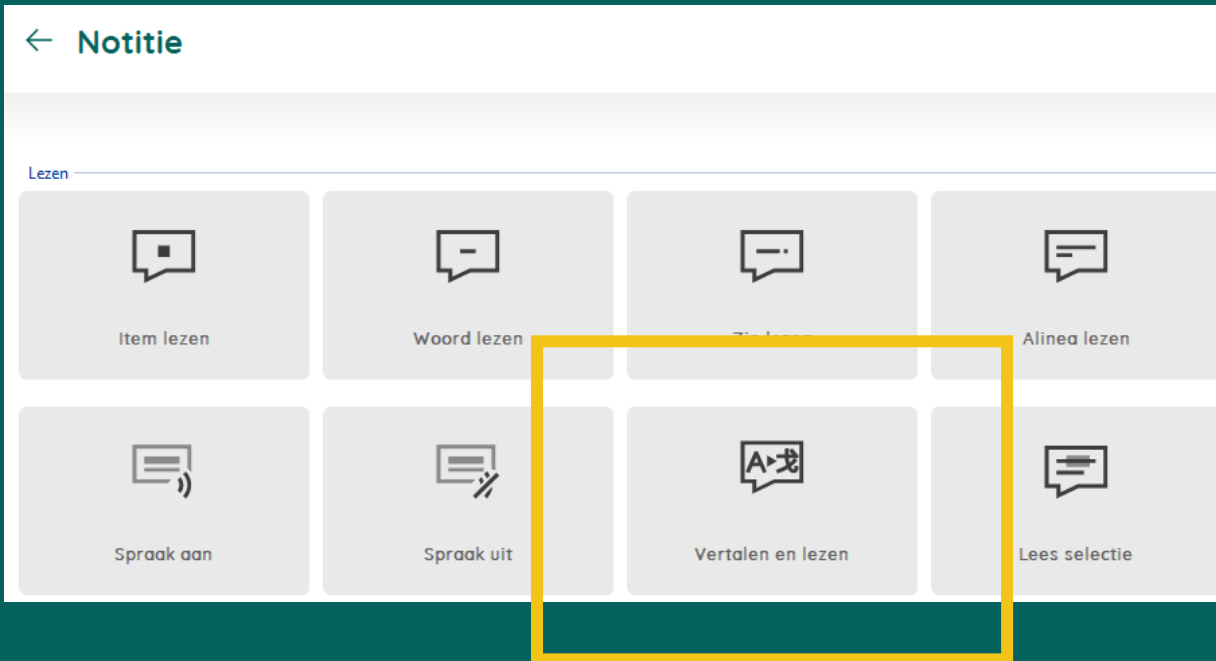

- Categorie 'Notitie'
- Van ... naar ingestelde taal (1 richting)
- Vlot te integreren in eigen taalsysteem



# Acties rond vertalen

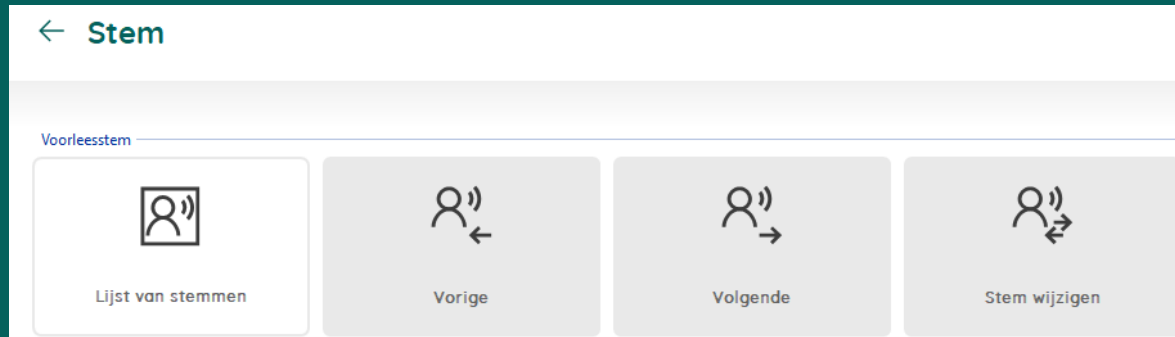

- Categorie 'Stem'
- Regie voor de gebruiker

# (Nieuwe) documenten: tijd

## Tijd



Agenda (2)



Dagplanning visualisatie activiteiten en tijdsverloop (agenda acties)



Planning van de dag



Visualisatie tijdsverloop



Individuele timer (persoon, activiteit en tijdsduur (2)

# Nieuwe documenten: social media

## Social media



Facebook (NL)



Instagram (NL)



Tiktok (NL)



Spotify (NL)



Disney+ (NL)

NETFLIX

Netflix (NL)



WhatsApp (NL)



Messenger (NL)

# Infotraject?

- Schooljaar 2024-2025
- 3<sup>e</sup> week september: eerste online moment
- 2<sup>e</sup> week oktober: terugkommoment

# Brainstorm

Wat hebben jullie nodig?

Bedankt voor jullie tijd

Vragen?

jabbla

# Bron

- <https://www.cetos.be/wp-content/uploads/2017/11/Ontwikkelingsdysfasie-en-Kinderafasie-Inge-Zink-en-Lies-Verlinde.pdf> (geraadpleegd op 11/04/2024)